



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)


2. Configurer mSupply Mobile sur l'appareil

Initialiser le dépôt

Après l'installation de l'application mSupply Mobile, vous devez exécuter une initialisation des données du dépôt pour lequel la tablette sera utilisé. Au démarrage de mSupply Mobile, le premier écran ressemble à ce qui suit:

Vous devez saisir:


- L'URL de votre serveur mSupply, utilisant normalement le protocole de sécurité SSL/HTTPS, e.g <https://yoursite.msupply.org>
- Le nom du site de synchronisation tel que défini sur le serveur principal.
- Mot de passe pour ce site de synchronisation tel que défini sur le serveur principal



[https://my.server.org:\(mySSLportNumber\)](https://my.server.org:(mySSLportNumber))

[My clinic's sync site name](#)

[*****](#)

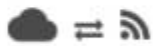

[**Connect**](#)

Une fois que vous avez saisi l'information, appuyez sur “Connecter” pour démarrer la synchronisation:



<http://192.168.4.16:8088>

[demo_clinic](#)

[****](#)



[**Initialising...**](#)

L'initialisation peut prendre entre 1 et 15 minutes, en fonction du nombre d'enregistrements sur le serveur appartenant au site en cours de synchronisation. Une fois que le serveur a trouvé tous les enregistrements à synchroniser, mSupply Mobile commencera à les extraire de manière adaptative

entre 20 et 500 enregistrements à la fois en fonction de la vitesse de connexion. Si la connexion est perdue ou si vous avez fermé l'application, vous pouvez reprendre la synchronisation là où elle s'est arrêtée en saisissant exactement les mêmes informations. mSupply recommencera à zéro si vous ne saisissez pas les informations du premier coup!



`http://192.168.4.16:8088`

`demo_clinic`

`****`

 = 

Pulling changes from the server
1320/3539

Se connecter au dépôt

Une fois la synchronisation complétée, l'écran de connexion vous sera présenté. Pour des informations passées ce point, consultez le [Manuel d'utilisateur de mSupply Mobile](#).

Limitation du nombre d'enregistrements de synchronisation initiaux

Si le nombre d'enregistrements à synchroniser est important (disons environ 50,000) la synchronisation pourrait prendre des heures, particulièrement dans le cas d'une *mauvaise* connexion internet. Pour cette raison, il est possible dans mSupply de limiter le nombre d'enregistrements à synchroniser à ceux créés durant les X dernier mois.

[illegible]

1. Vous devez changer le type de synchronisation du dépôt de "collector" à "active" ou "none" afin de déverrouiller les données personnalisées du dépôt.
2. Ajoutez une ligne de donnée personnalisée avec `syncMonths` comme titre du champ ("Field label") et avec la valeur numérique désirée comme valeur du champ ("Field value")
3. Rechangez le type de synchronisation du dépôt à "collector"

Désormais, lorsque vous effectuez la synchronisation initiale, le dépôt n'obtiendra que les transactions et les inventaires se situant entre la date du jour et le nombre de mois spécifié.



Liens connexes

- Manuel d'utilisateur mSupply mobile

Retournez à: [Page d'accueil de mSupply Mobile](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:device_side:3?rev=1581456673

Last update: **2020/02/11 21:31**

