



# User Guide - mSupply Mobile

---

## Começando a usar

### Requisitos de Hardware

#### Especificações mínimas

- Tamanho mínimo do ecrã: **9.8 inches** (medida diagonal)
- Resolution mínima do ecrã: **768 x 1024 pixels**

#### Especificações recomendadas

- Resolução mínima do ecrã: 800 x 1280 pixels
- Habilitado com Dados de celular (ao menos 3G)
- Android 4.4.4 ou acima
- 1.5 Gb Ram
- Quad-core 1.3 GHz

### Instalação

Para obter a versão mais atualizada do mSupply mobile, clique [aqui](#)

Se você está atualizando para a versão mSupply Mobile 2.0.0 ou acima, o servidor mSupply também precisará ser atualizado.

- Atualize o servidor mSupply para a versão 3.83 ou acima
- Selecione a visibilidade para todos seus Fornecedores
- Adicione novos Fornecedores externos como Instalações e selecione como visível para o local usando mSupply mobile.
- Configure outros locais (*desktop/mobile*) - com os quais a sua clinica usando mSupply mobile deverá se conectar (enviar/receber Requisições, enviar/receber Faturas) - como '*transfers*' na aba 'Sincronização' do local (isso deve ser feito pelo suporte do mSupply)

### Inicialização


O aplicativo mSupply mobile precisa estar instalado no seu tablet primeiro. Ao iniciar o aplicativo mSupply mobile, você deverá preencher o local, senha e a URL onde se encontra o servidor mSupply

que armazena e envia os dados para o seu tablet.

## OK. Aqui vamos nós!


Esta é a tela de login. Você deve inserir aqui o usuário e a senha quando o tablet estiver instalado na sua clínica. O tablet irá conectar-se apenas com uma instalação.

A primeira coisa a fazer é selecionar a língua de preferência clicando em **Língua** no canto inferior do seu ecrã.

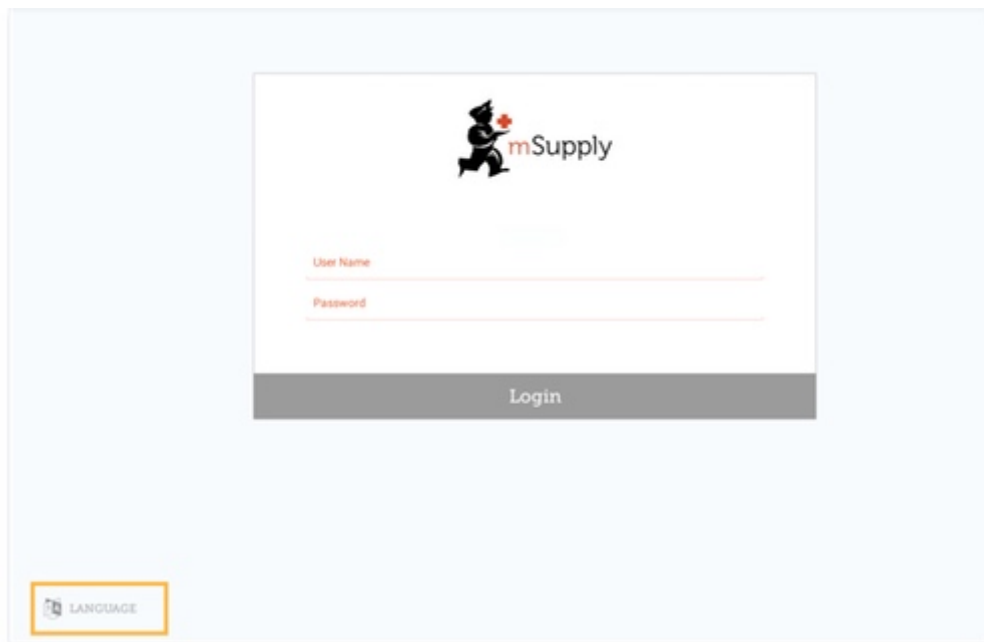

O tablet acima está solicitando que seja inserido o usuário e senha para quem estiver logado no local. Esse usuário e senha deve estar configurado no servidor mSupply primordialmente. Por favor, acesse [Gerenciando usuários](#) no Guia de usuários mSupply.


No exemplo abaixo, se a sua língua de preferência é Tetum, você está com sorte!

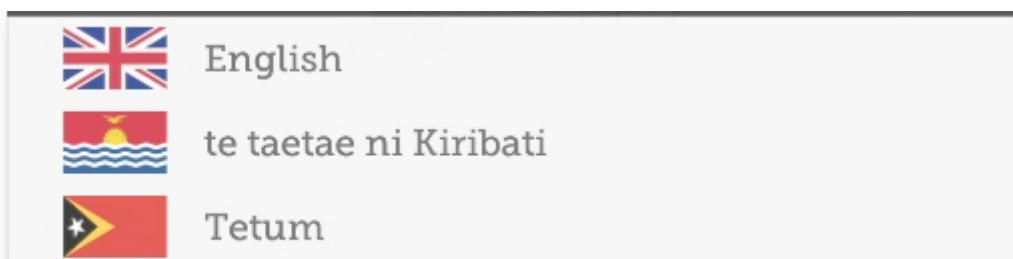


Assim que você estiver escolhido a sua língua de preferência, insira seu usuário, senha e clique em **Entrar!**




Você será levado para a tela principal. Nós estaremos retornando para a tela principal muitas vezes durante a utilização do aplicativo do mSupply mobile, então é importante aprender suas principais ferramentas. Vamos detalhar cada uma delas.

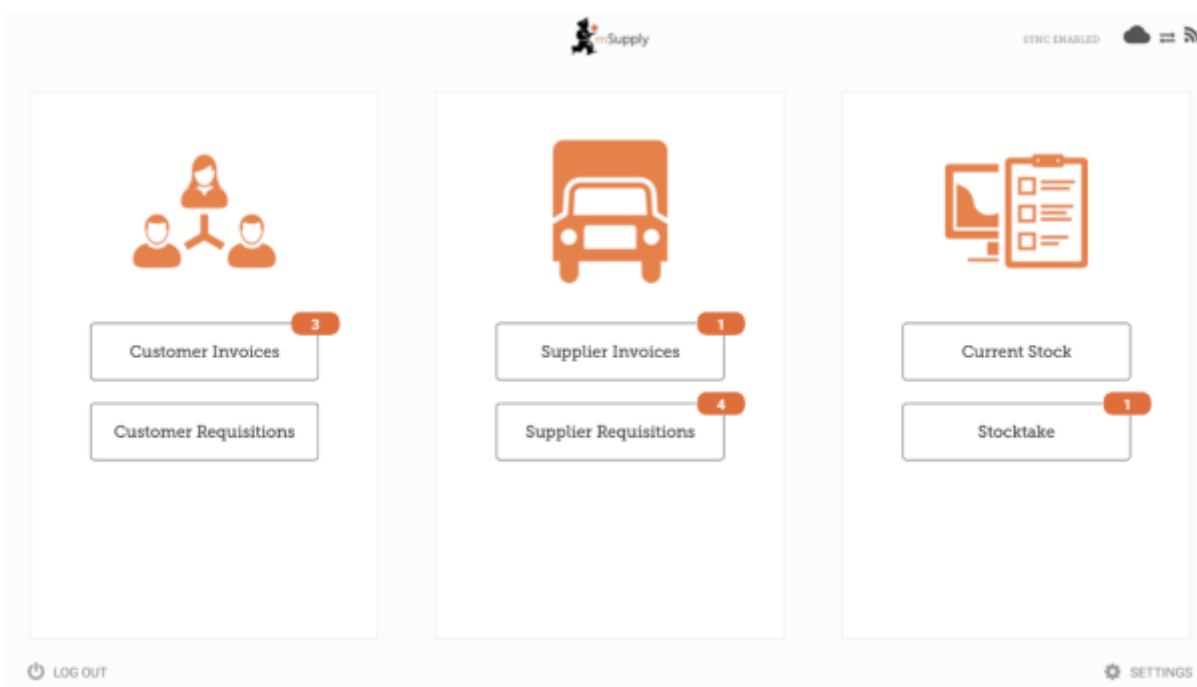


O número em vermelho indica que existem transações não finalizadas precisando de atenção. Clique nele para ver a descrição. Esses números são automaticamente removidos quando não houverem mais transações não finalizadas.

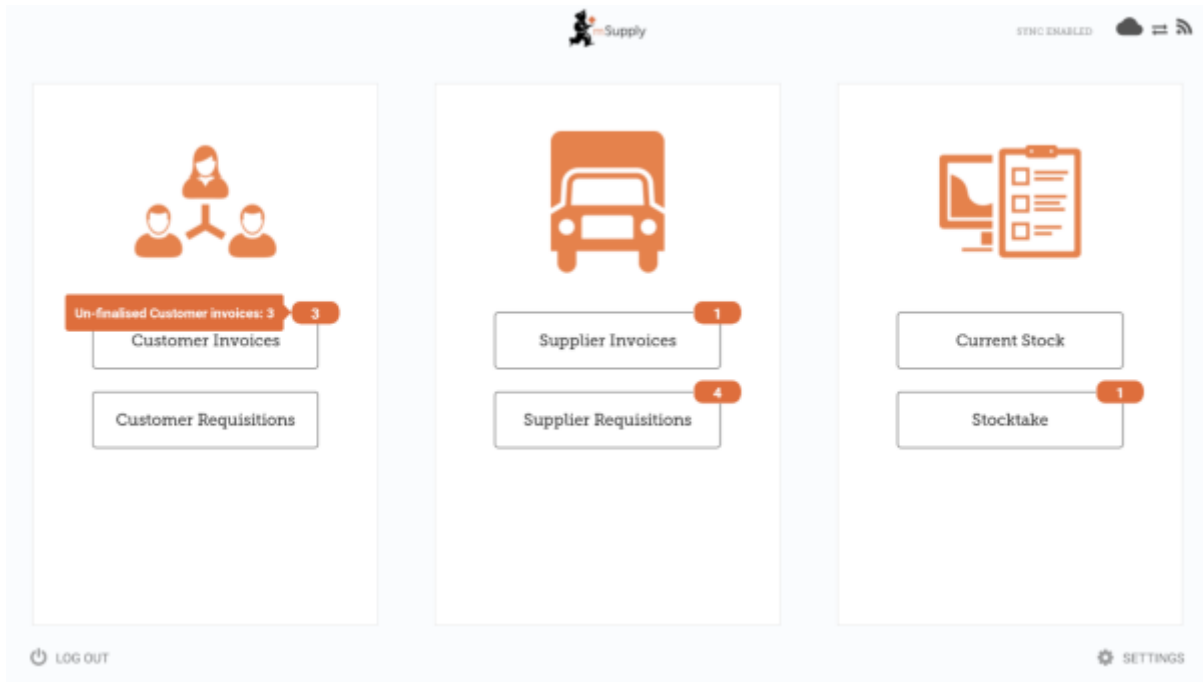

O link no canto superior direito do ecrã mostra **Sync Status**

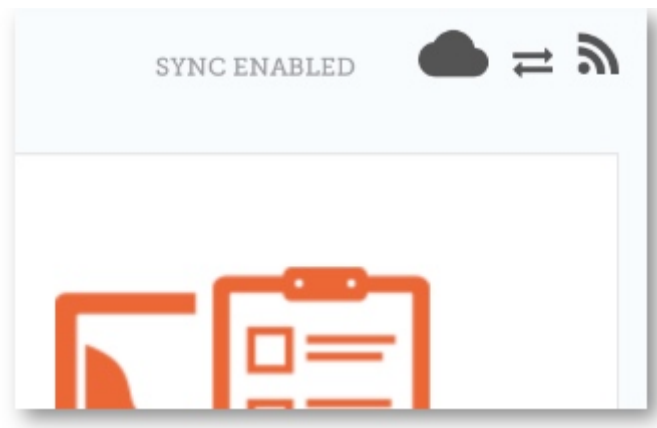


Clicar no link o levará para uma página onde você poderá escolher fazer uma sincronização manual se houver conexão com internet.

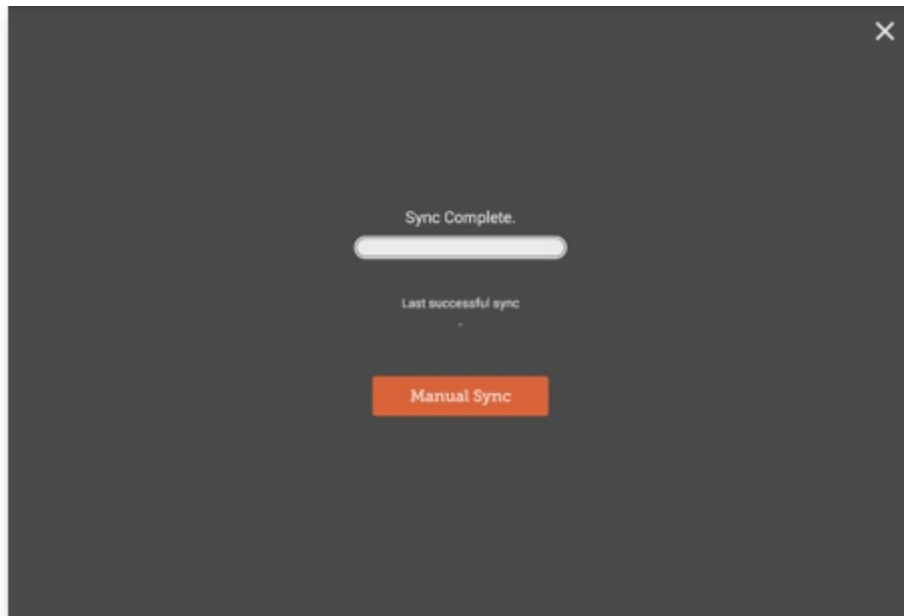


Você poderá fechar essa página ao clicar no X no canto superior direito.


Usuários com permissão poderão acessar as **Configurações do dispositivo** no canto inferior direito do ecrã.

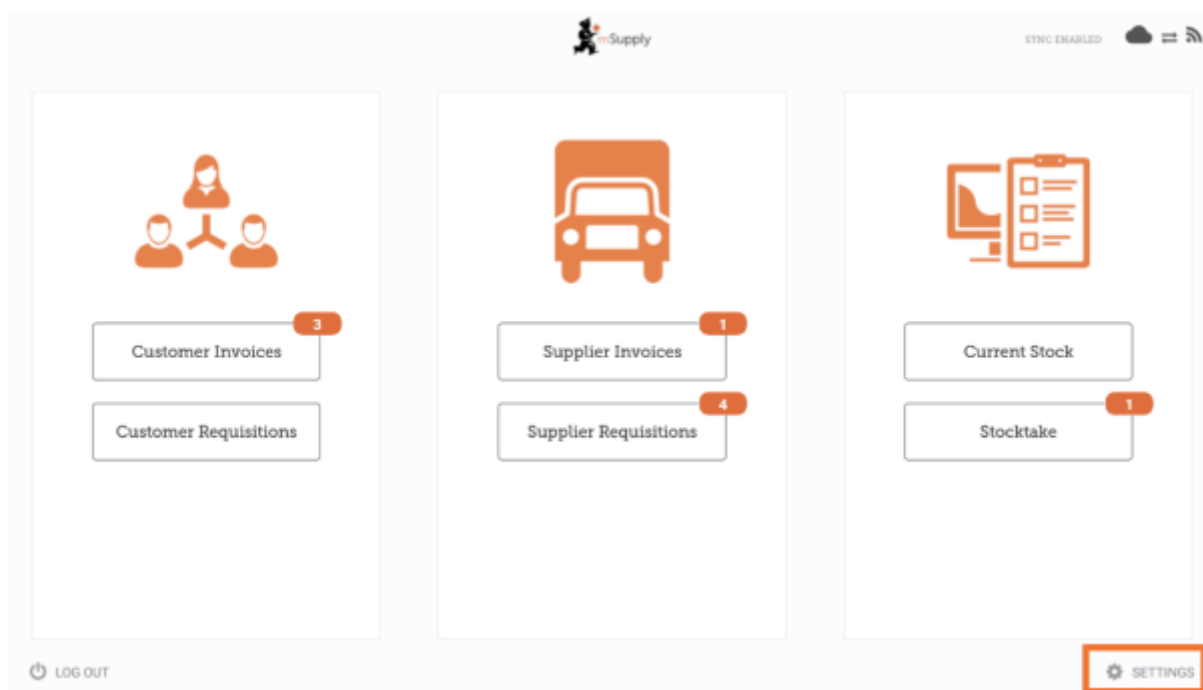

To log out, click the **Log Out** button on the bottom left of the screen. Para sair, clicar no botão **Sair** no canto inferior do ecrã.

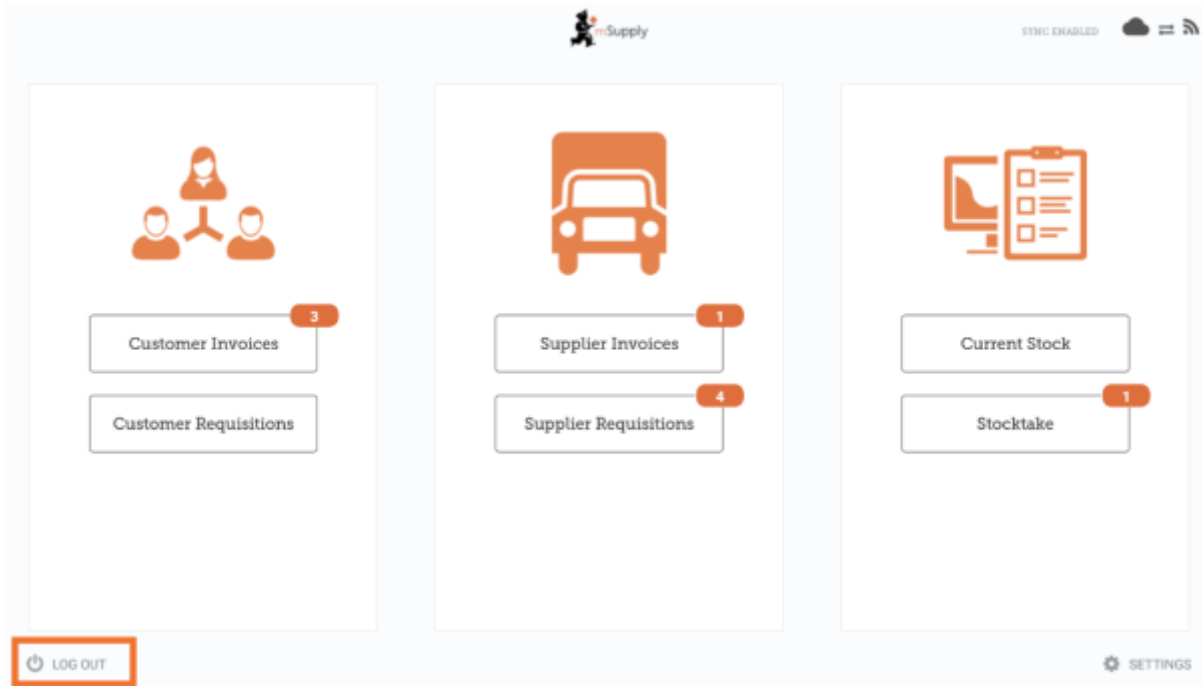

## Clientes

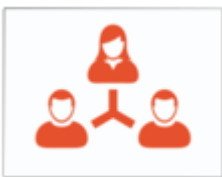

A área dos **Clientes** é destinada a todo estoque que está saindo da sua instalação. Clientes podem ser **Outras instalações** para onde o seu local fornece, **médicos** ou **enfermeiros** que atendem fora das clínicas ou **Pacientes**.



O botão **Faturas de clientes** mostrará a lista de pedidos enviados AOS seus clientes e permitirá adicionar novos pedidos.



O botão *\*Requisições de clientes\** mostrará a lista de pedidos feitos PELOS clientes requisitando medicamentos do seu estoque.

## Fornecedores



A área dos **Fornecedores** mostra os pedidos feitos e recebidos no seu local para compor o **seu estoque**. Normalmente, você terá UM fornecedor (um depósito central ou outra instalação) e isso deverá estar previamente configurado pra você.



O botão **Faturas dos fornecedores** mostrará a lista de pedidos que foram **recebidos** ou estão aguardando recebimento.

Supplier Requisitions

O botão **Requisições dos fornecedores** permite você **fazer um pedido** e mostra uma lista de pedidos que já foram feitos.

## Estoque



A seção de **Estoque** é usada para gerenciar o seu estoque atual.

Current Stock


O botão **Estoque atual** permitirá ver facilmente quanto de estoque de cada medicamento está disponível na sua instalação (“*Quanto de Paracetamol ainda temos?*”), procurar por um item individual ou verificar datas de validade.

Stocktakes

O botão de **Inventários** permitirá você fazer um inventário de todos os itens do estoque atual ou de uma seleção menor de itens e mostrará uma lista com todos os inventários anteriores. Você também poderá usar essa área para atualizar os níveis de estoque de itens quando perceber que houve um erro de contagem.

---

(E assim é a tela principal na língua Tetum!)

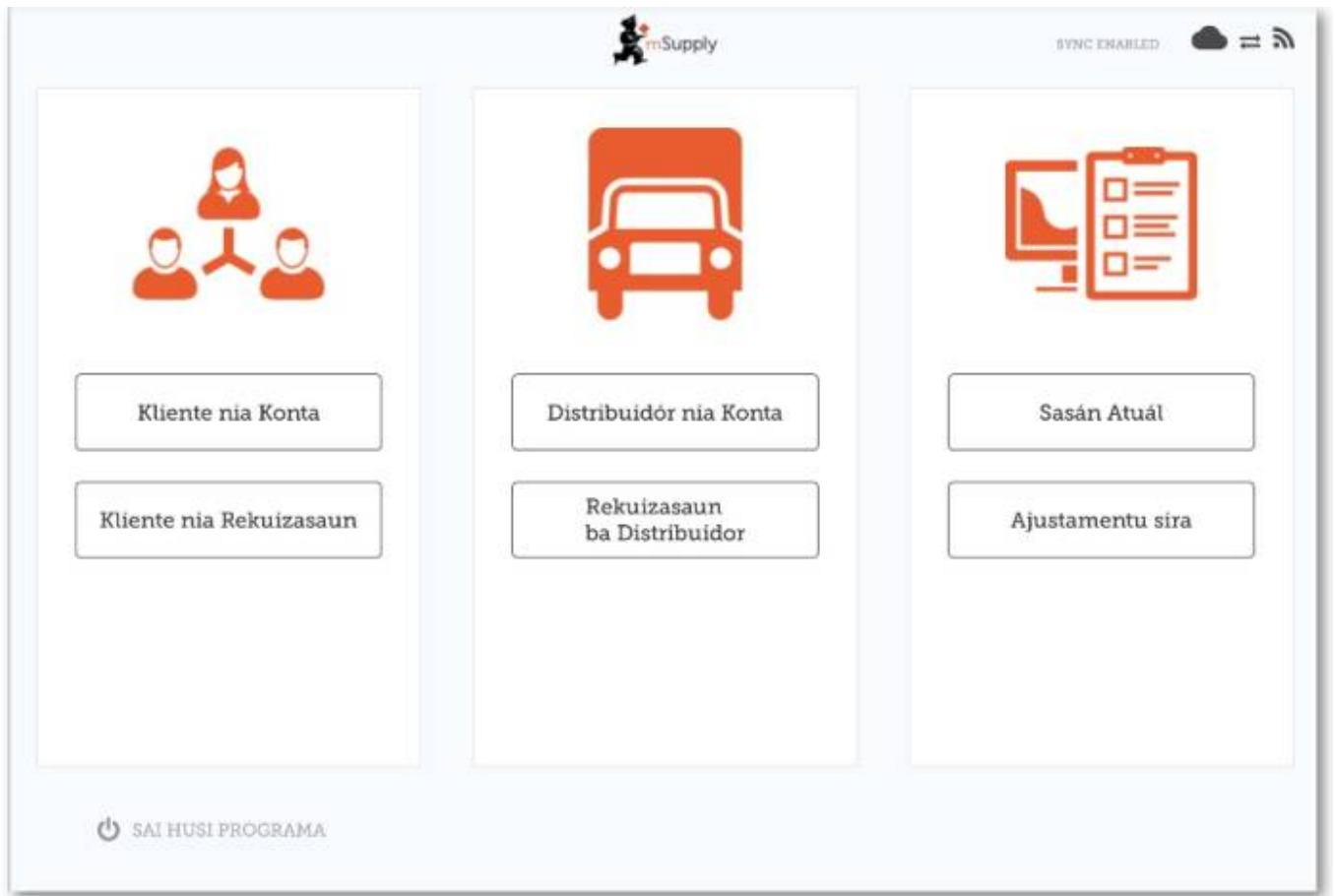

Anterior: [Guia do usuário - mSupply Mobile](#) | | Próximo: [Faturas para clientes](#)

From: <https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: [https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user\\_guide:getting\\_started?rev=1581453010](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:getting_started?rev=1581453010)

Last update: **2020/02/11 20:30**

